

Shiatsu Massagegerät

Art.-Nr. 137615811

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.



Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie dieses Gerät ausschliesslich gemäss den Richtlinien in der Bedienungsanleitung. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
- Im Falle von unsachgemäßem Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen werden.
- Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist.



- Benutzen Sie nur das mit dem Massagegerät **mitgelieferte Netzteil**.
- Vor Anschluss an das Netz müssen Sie **überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Gerätetypschildes übereinstimmen**.
- Die elektrische Steckdose, in der Sie das Gerät anschliessen, **darf nicht defekt oder lose sein** und muss für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig geerdet sein.
- **Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels**, denn dieses könnte überhitzen und einen Brand erzeugen.
- Verdrehen Sie das Netzkabel nicht und knicken Sie es nicht ab.
- **Ziehen Sie nicht am Netzkabel**, um das Gerät vom Netzstrom zu trennen. Ziehen Sie **immer am Stecker**, um das Netzkabel herauszuziehen.



- Betreiben Sie das Gerät **KEINESFALLS unter einer Decke oder einem Kissen**. Das Gerät kann überhitzen, was zu Feuer, Stromschlag und/oder Verletzungen führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät **NICHT in der Nähe von Wasser oder hoher Luftfeuchtigkeit**.




- Verwenden Sie das Gerät **NIEMALS, wenn Ihr Körper nicht vollständig trocken ist**.
- **Tauchen Sie das Gerät NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten** und meiden Sie Spritzwasser und Feuchtigkeit. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren Sie den Kundenservice.
- Benutzen Sie dieses Gerät **nicht als Ersatz für medizinische Anwendungen**. Chronische Leiden und Symptome könnten sich noch verschlechtern.
- **Bitte benutzen Sie das Gerät NICHT, wenn:**
 - Sie einen Herzschrittmacher, künstliche Gelenke oder elektronische Implantate haben.
 - Sie an einer oder mehreren der folgenden Krankheiten oder Beschwerden leiden: Durchblutungsstörungen, Krampfadern, offene Wunden, Prellungen, Hautrisse, Venenentzündungen, Wärmeempfindlichkeiten, Kreislaufstörungen.
- Sollten Sie Schmerzen verspüren oder die Massage als unangenehm empfinden, brechen Sie die Anwendung sofort ab und sprechen Sie mit Ihrem Arzt.
- Bei ungeklärten Schmerzen, wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden und/oder medizinische Geräte benutzen, konsultieren Sie vor Benutzung des Massagegerätes Ihren Arzt.
- Bitte benutzen Sie das Gerät **NICHT, wenn Sie Öle oder Lotionen auf der Haut aufgetragen haben**.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern.
Bei Verschlucken besteht Erstickenungsgefahr!

- **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen!**
- Kinder unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn es unter einer angemessenen Aufsicht geschieht und es zu einer ausführlichen Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise gekommen ist sowie die bestehenden Gefahren beschrieben wurden.
- Bewahren und lagern Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

Hinweise zu Recycling & Entsorgung	Technische Daten	
 <p>RECYCLING Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Daher wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen.</p>	Nennspannung:	12 V DC
	Leistung:	24W
	Nennfrequenz:	50Hz
	Schutzklasse:	II
 <p>ENTSORGUNG Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie diese daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.</p>	Hinweis zur Konformitätserklärung	
	 <p>Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU laut EMV 2014/30/ EU, LVD 2014/35/EU und RoHS 2011/65/EU entspricht.</p>	

Beschreibung des Geräts

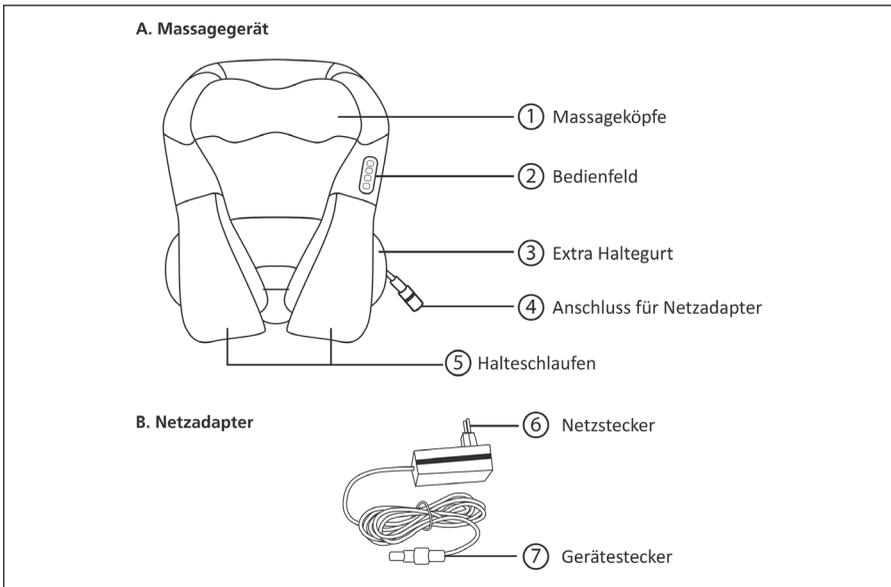


Massagebereiche


- Das Massagegerät ist für viele Bereiche des Körpers anwendbar und passt sich mit seinem ergonomisch geformten Design jedem Körperteil an.
- Den Massagedruck können Sie mithilfe des Zugs selber einstellen. Legen Sie dazu die Hände in die Schlaufen und ziehen oder lockern Sie das Massagegerät je nach Bedarf, um die Massage zu intensivieren oder abzuschwächen.
- Wir empfehlen das Massagegerät für folgende Körperbereiche:



Nacken und Schultern

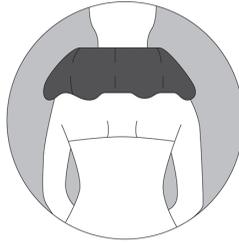


Nacken

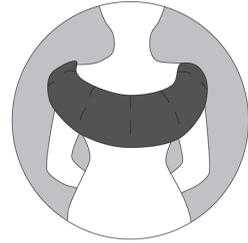

Rücken



Taille

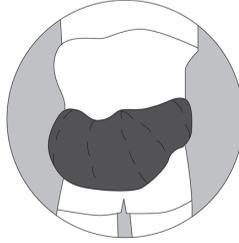


Bauch




Oberschenkel



Beine

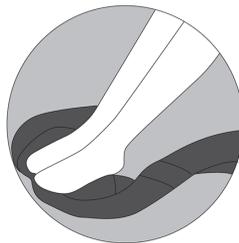

Füße

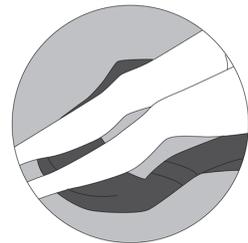

Waden

Lieferumfang

- Massagegerät
- Extra Haltegurt
- Netzadapter
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

1. Schliessen Sie den Netzadapter an, um das Gerät aufzuladen.
2. Die Ladezeit beträgt ca. 2 Stunden.
3. Platzieren Sie das Massagegerät auf den gewünschten Körperbereich.
4. Stellen Sie nun die Funktionen wie gewünscht ein:



An/Aus

Schalten Sie das Gerät ein und aus. Bitte beachten Sie: Das Gerät schaltet sich nach 15 Minuten Betrieb aus Sicherheitsgründen automatisch aus.



Geschwindigkeit

Stellen Sie die Massagegeschwindigkeit ganz nach Ihren persönlichen Bedürfnissen ein. Sie können zwischen 3 verschiedenen Geschwindigkeiten auswählen.



Massagerichtung

Sie können die Massagerichtung nach Belieben ändern, um die Verspannung optimal zu massieren.



Wärmefunktion

Einfach ein- und ausschalten, um der Massage angenehme Wärme zuzufügen und die Durchblutung zu fördern.



Im Lieferumfang erhalten Sie einen extra Haltegurt, um das Gerät handfrei verwenden zu können. Ziehen Sie dazu den Haltegurt durch die Schlaufen und fixieren Sie diesen je nach Bedarf.

Inbetriebnahme

- Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Das Massagegerät reinigen Sie nur mit einem leicht angefeuchteten Schwamm. Verwenden Sie keinesfalls Bürsten, scharfe Reinigungsmittel, Benzin, Verdüner oder Alkohol.
- Trocknen Sie das Massagegerät mit einem sauberen, weichen Tuch.
- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser und achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät eindringen.
- Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es völlig getrocknet ist.
- Entwinden Sie das Kabel, falls es verdreht ist.
- Wickeln Sie das Stromkabel sorgfältig auf, um einen Kabelbruch zu vermeiden.
- Verstauen Sie das Gerät am besten in der Originalverpackung und bewahren Sie es an einem sicheren, sauberen, kühlen und trockenen Platz auf.

Fehlersuche

Problem	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none">• Laden Sie das Gerät auf.• Prüfen Sie, ob der Netzstecker vollständig in der Steckdose eingesteckt ist.
Das Gerät schaltet sich während der Massage ab	<ul style="list-style-type: none">• Das Massagegerät schaltet sich nach 15 Minuten automatisch ab.• Das Gerät ist entladen.• Das Gerät verfügt über einen integrierten Überhitzungsschutz – lassen Sie das Gerät eine Stunde lang gründlich abkühlen und versuchen Sie es dann wieder einzuschalten.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Weltbild

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0.08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)